

# WIT-B200A /WIT-B200B 臂式电子血压计

小巧便携 精确智能 蓝牙传输



> WIT-B200A:



小尺寸

> WIT-B200B:

蓝牙  
小尺寸



## 外观展示

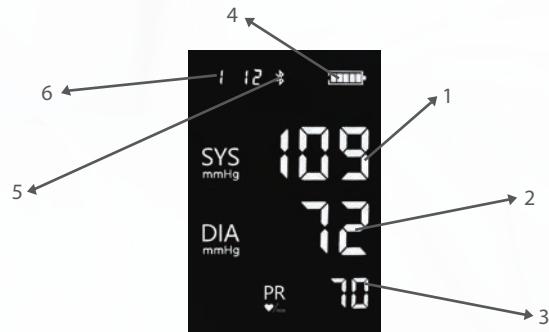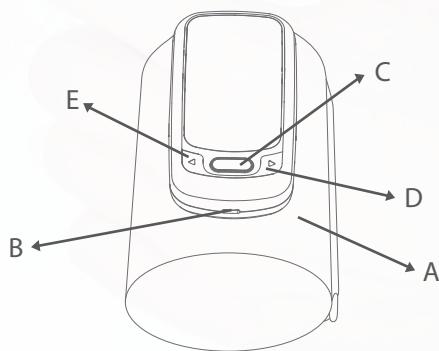

序号	名称	序号	名称
A	袖带	C	开始/停止 按钮
B	USB接口	D & E	查看记录 按钮

序号	名称	序号	名称
1	收缩压	4	电量显示
2	舒张压	5	蓝牙状态显示
3	脉率	6	时间显示

## 产品特点

- 一体机设计。紧凑的设计提供了方便的测试无论是在家里还是在外出路上。
- 无线超迷你设计，携带方便。
- 智能上臂袖口，适合各种尺寸的手臂。
- 查看、跟踪并传输到手机(蓝牙功能)
- 测量血压，显示结果，记录结果并传输数据(蓝牙)
- 高精度振荡读数
- 全面显示：舒张压、收缩压和脉率。
- 蓝牙数据传输
- 电量不足提醒功能



蓝牙数据连接APP

## 产品规格

### 收缩压

测量范围：60~255mmHg

测量精度：平均偏差 $<\pm 5\text{mmHg}$  标准偏差 $<8\text{mmHg}$

分辨率：1mmHg

### 舒张压

测量范围：30~195mmHg

测量精度：平均偏差 $<\pm 5\text{mmHg}$  标准偏差 $<8\text{mmHg}$

分辨率：1mmHg

### 袖带压

测量范围：0~300mmHg

测量精度： $\pm 2\text{mmHg}$  或读数的 $\pm 1\%$  (取较大值)

分辨率：1mmHg

## PR

测量范围: 40~190bpm

测量精度:  $\pm 3\text{bpm}$

分辨率: 1bpm

## 物理参数

名称: 上臂血压计

型号: WIT-B200A / WIT-B200B

尺寸: 110mm \* 55mm \* 30mm

重量: 约 250g

压力检测: 压力传感器

测量方法: 示波法

可重复性: 在静态连续低压状态下测量, 每一点重复测量的读数之间相差不大于4mmHg (0.533kPa)

校准频率: 建议一年一次

标配袖带: 适用臂围范围为22-32厘米

可选袖带: 适用臂围范围为33-43厘米

## 使用和存储参数

工作电源: 锂离子电池3.7V 1000mAh

工作环境: 工作温度: 5°C-40°C

相对湿度: 15% - 80%

大气压力: 80KPa-105KPa

储存条件: 存储温度: -20°C-55°C

相对湿度: 10% ~ 95%, 非冷凝

大气压力: 50KPa-106KPa

## 标准配置 (含包装) :

1 × 血压计  
1 × USB

1 × 保修卡  
1 × 证书

1 × 用户手册  
1 × 装箱单

## WIT-B200A

## WIT-B200B

LCD屏幕

2.5 inch

2.5 inch

平均值



高精度



蓝牙



数据存储

100

100

供电方式

3.7V锂离子电池


3.7V锂离子电池

低电量报警



## 血压测量

\*请放松并舒适地坐着，双腿不要交叉，双脚平放在地板上，椅背靠在椅子上，手臂穿过护套的位置放在护垫上，保持护套的中部在右心房的水平线上。

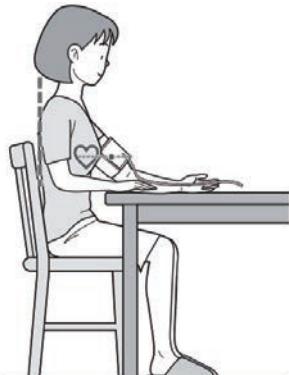

\*建议两次测量的时间间隔在5分钟以上。

本机左右臂均可测量血压，常用右臂测量。

## 专利证书

### 软件著作权

登记号: 2017SR069461

\* 数据仅供参考，一切以实际使用情况为准，本文件中包含的信息如有变更，恕不另行通知。

## 深圳市惟拓力医疗电子有限公司

地址：深圳市光明区玉塘街道光明高新园西片区森阳电子科技园厂房一栋1201

电话：+86 0755-21384132

邮箱：sales@szwitleaf.com

官网：www.szwitleaf.com

**Witleaf**

